

# Imax MV

## EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

El Imax MV es un equipo portátil liviano y de fácil manejo.






El Imax MV posee un colimador ajustable en tamaño que al ser retroiluminado y poseer lasers de centrado permite obtener un óptimo posicionamiento del campo a irradiar.

> **CARACTERISTICAS**

Alta Tensión	60-90 Kv regulable a intervalos de 10 Kv
Corriente al tubo	30 mA
Tiempo de exposición	0.04 a 2.99 seg
Peso	12 Kg
Tamaño Máximo de Radiografía	35 x 43

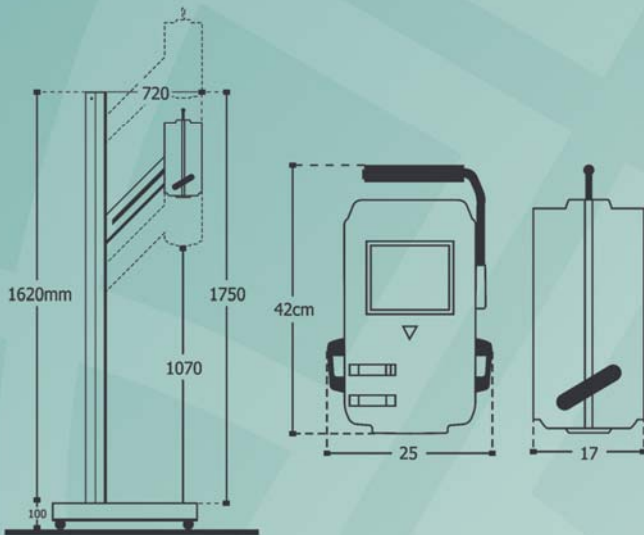

Su reducido tamaño y peso lo hacen especial para ser transportado a domicilios, en combinación con nuestra maleta con ruedas se brinda al equipo la máxima protección y comodidad en los traslados.



El control digital del equipo IMAX MV le permite seleccionar tiempos de exposición desde 0.04 seg hasta 2.99 seg con tres opciones de disparo: directa, con retardo o mediante control a distancia.

También le brinda la posibilidad de seleccionar el Kv a utilizar.

